

TEAC®

从未如此容易捕捉医学影像

- 全高清 1920 × 1080 视频记录
- 极易使用
- 高级故障安全功能
- 3.5 英寸 LCD 显示器，用于实时查看、回放或 GUI




UR-4MD 是 TEAC 最新的高清医学视频记录器，设计用于快速设置并易于使用，但包含一系列强大的特性和功能。它具有自动感应视频连接和自动视频分辨率检测，使得设置快捷、方便。

前控制面板可让用户用水晶般清晰的高清直观地记录视频和照片。

包含内置硬盘驱动器，用于储存可靠的记录和数据备份，用户也可以同时记录到 USB 存储器和 USB 硬盘驱动器进行存档，并在其他设备和位置进行共享和回放。UR-4MD 也能联网。

UR-4MD

系统配置

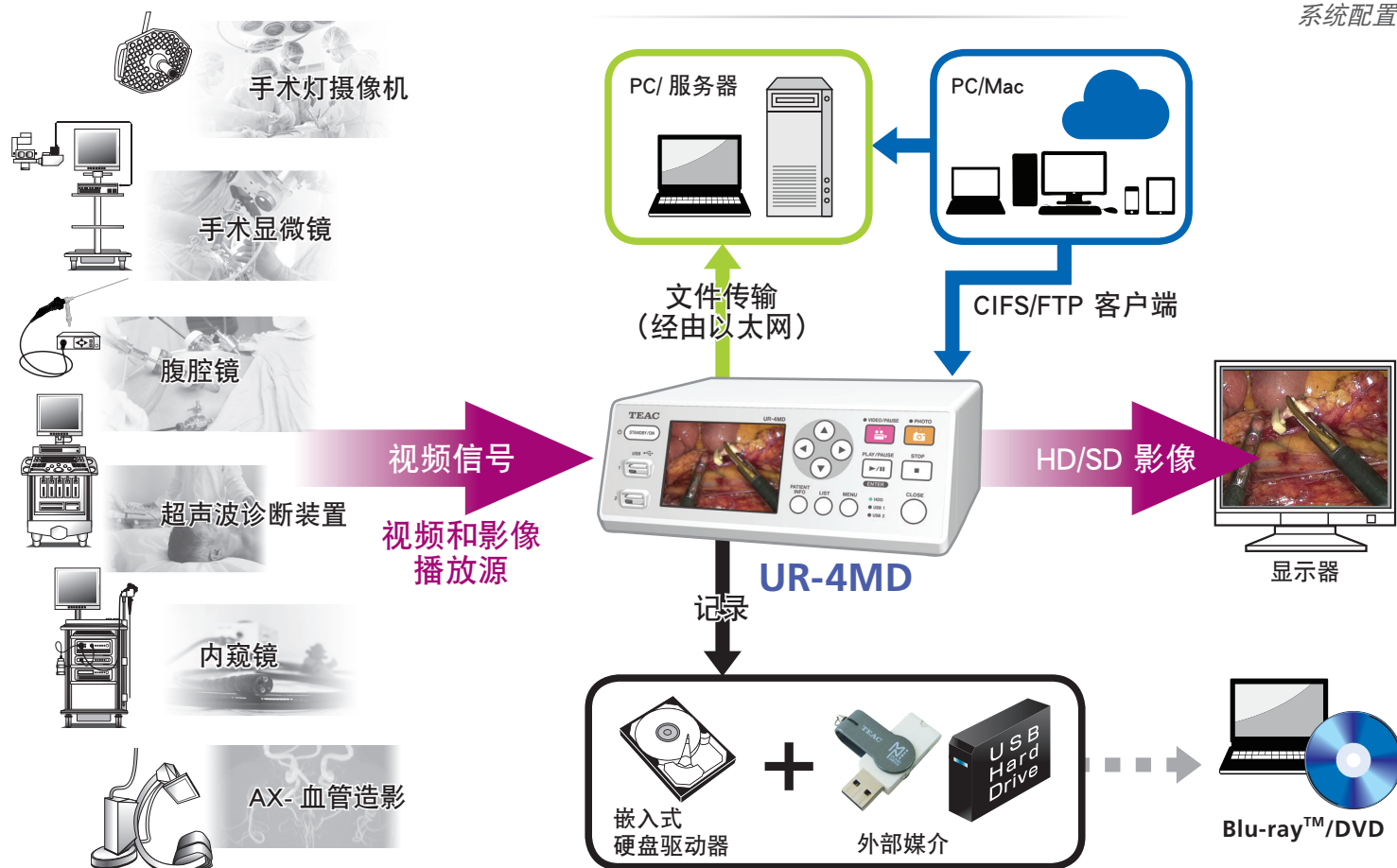

功能

- **直观且易于使用**
- “自动”感应检测输入 / 输出和视频分辨率
- **记录分辨率的范围广**
640x 480 ~ 1920x 1080 (30Hz/29.97Hz) : 原汁原味的记录分辨率
1920x 1200 (调整为 1728x 1080) : 支持的输入分辨率
- **多 HD 和 SD 输入 / 输出** (SDI, DVI-D, S- 视频和复合)
- **同时记录至多个媒介** (最多 2 个外部 USB 驱动器和 1 个内置 HD)
- **网络** (FTP 和 CIFS) RJ45 10/100/1000 以太网
- 遥控器, 脚踏开关, 读卡器 / 条码阅读器和键盘 (选购)
- 符合医学标准



UR-4MD

为关键任务 OR 环境任务而设计

- ✓ 故障安全记录功能, 有用于大量数据备份的内置硬盘驱动器
- ✓ S.M.A.R.T. 显示器 / 报告内置硬盘驱动器的状态 (自我监测, 分析和报告技术)
- ✓ 断电情况下的安全自动关机
- ✓ 耐流体前面板

规格

一般		大致的记录时间 对应 500GB 的硬盘驱动器		
可记录装置	USB 闪存驱动器	高清 1920 × 1080		
	USB 硬盘驱动器	12Mbps	18Mbps	24Mbps
	内置硬盘驱动器（500GB）	90 小时	60 小时	45 小时
显示器	3.5 英寸 LCD	标清 640 × 480		
电源	AC 100V - 240V 50/60Hz	5Mbps	8Mbps	10Mbps
操作温度	5 至 40 °C	180 小时	135 小时	100 小时
存储温度	-20 至 60 °C			
操作湿度	5 至 80%（无结露）			
尺寸（宽 × 深 × 高）	约 210.5 × 235 × 88.5 mm			
重量	约 2.6 kg			
标准	安全	IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1		
	EMC	IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, FCC B 类		
类别	FDA I 级			
附件（选购）	遥控器装置，脚踏开关，键盘，条码阅读器 / 读卡器			
记录格式				
静止图像	Jpeg			
视频	MPEG-4 AVC/H.264			
输入/输出				
用于视频的输入	SDI（BNC）x1	高清（50p/59.94p/60p）		
	DVI（单链路）x1	高清		
	S-视频 x1	NTSC, PAL		
	复合（BNC）x1	NTSC, PAL		
用于音频的输入	SDI（BNC）x1	*通常用作 SDI 视频输入端子。		
	立体声迷你插孔 x2	LINE, MIC		
用于视频的输	SDI（BNC）x1	高清（50p/59.94p/60p）		
	DVI（单链路）x1	高清		
	S-视频 x1	NTSC, PAL		
	复合（BNC）x1	NTSC, PAL		
用于音频的输	SDI 直通 x1			
	SDI（BNC）x1	*通常用作 SDI 视频输出端子。		
	立体声迷你插孔 x1	LINE		
其他媒介	RJ-45（10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T）x1			
	USB2.0 A 型 x3	用于可记录装置的 2 个前置接口		
	USB2.0 B 型 x1	用于选购附件的 1 个后置接口		
	立体声迷你插孔 x3	用于访问内置硬盘驱动器（在 UR-4MD 上）的 1 个后置接口 用于外部触发器		

“Blu-ray™ Disc”, “Blu-ray™” 和 “Blu-ray™ Disc” 标识是 Blu-ray™ Disc Association 的商标。

本文件中的其他公司名称, 产品名称和标识是它们各自所有者的商标或注册商标。

*功能和规格若有变更, 恕不另行通知。

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan
电话: +81-42-356-9154 传真: +81-42-356-9185
<http://teacmv.jp/en/>



后面板